



口腔正畸扫描仪



ACTIVITY 300




Activity 300 是一款最新的、针对口腔正畸应用而设计的紧凑型扫描仪，可快速、方便且完全自动化地进行颌部整体扫描。设备采用条状光源，短时间内可完成高精度的扫描。

应用领域包括：

- 模型的 3D 扫描用于存档
- 可视化，为患者解释治疗过程

扫描结果提供开放式 STL 格式，因此可用于任何后续的软件包，与制造商无关。Activity 300 设备外型小巧，尺寸为 300 x 170 x 360 mm（宽 x 高 x 深），适用于任何工作站。

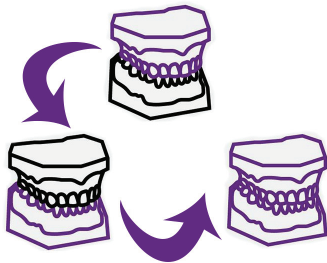


性能：

- 测量时间为每个颌部小于 60 秒
- 结果输出为 STL 格式
- 模型可以在相互咬合状态下扫描
- 外形优雅，省空间
- 扫描软件可在 Windows 7® 64 位以及 Windows 8.1® 64 位下运行
- 操作直观简单
- 应用软件可提供下列语言版本：

德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、希腊语、土耳其语、俄语、日语以及中文。

请联系您的经销商安排一次无约束力的演示。

smart optics 已通过 ISO 13485 和 ISO 9001 认证。

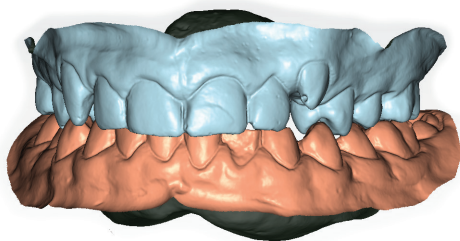

规格	
外壳	铝制绒面，蓝色背光电源键及扫描状态显示
尺寸 & 重量	设备： 300 x 170 x 360 (宽 x 高 x 深，单位 mm), 8kg
供货范围	1 x 电源线, 1x USB 线, 1x 可拆除模型架, 电子版软件和手册
测量原理	光学，条状光源，全自动，3D 强光 LED
精确度	25 µm
工作电压	100-240V 交流，50/60Hz，最大功率 45 瓦
端口	USB 2.0 兼容，IEC 电源插头
软件	结果输出为标准开放式 STL，图像设备界面

smart optics Sensortechnik GmbH 公司

Lise-Meitner-Allee 10 | 44801 Bochum, Germany

电话：+ 49 234 / 29 828-0 | 传真 + 49 234 / 29 828-20

电子邮箱：info@smartoptics.de | www.smartoptics.de

